

Siemens Medical Solutions Diagnostics ofrece un amplio abanico de soluciones diagnósticas de rendimiento que ofrecen formas más eficaces para ayudar en el diagnóstico, monitorización y manejo de las enfermedades. El conjunto de nuestros productos y servicios reúne el equilibrio perfecto entre ciencia, tecnología y utilidad en toda la rama de la salud; cumpliendo con el compromiso de dotar a los profesionales de la medicina con la información vital necesaria para ofrecer a los pacientes de todo el mundo un cuidado mejor y más personalizado.

© 2007, Siemens Medical Solutions Diagnostics-Order No. A91DX-0700449-C2-7800
Impreso en USA
Clintek, Clintek Advantus y todas las marcas asociadas son marcas registradas en Siemens Medical Solutions Diagnostics. El resto de marcas y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

* La disponibilidad de los productos puede variar de un país a otro y está sujeta a requisitos legales distintos. Por favor contacte su representante local para conocer la disponibilidad de los productos.

Las especificaciones pueden cambiar. Por favor, consulte la hoja de especificaciones del producto para obtener una información más actualizada.

Siemens Medical
Solutions Diagnostics, S. de R.L. de C.V.
Av. Coyoacán No. 1553, Colonia del Valle
C.P., 03100. México, D. F

Siemens Medical Solutions Diagnostics
Línea de Ayuda Básica Siemens:
Tel: 7 28 3315 / 5728 3312
01 800 714 3751/ 01 800 704 6900

www.siemens.com/diagnostics



Confiabilidad Demostrada, Mayor Flexibilidad

Clintek Advantus™ Analyzer

Siemens Medical Solutions Diagnostics

SIEMENS
medical

¿Cómo puede mejorar la productividad y mantener la mejor calidad?

Con el analizador semiautomatizado de orinas Clintek Advantus

¿Cómo puede asegurar resultados de alta productividad y calidad óptima?

Con un analizador químico de orina fiable y de gran productividad basado en la demostrada tecnología de su predecesor, considerado como un estándar en el mercado.

¿Cómo puede asegurar resultados de alta calidad con una carga de trabajo que aumenta constantemente?

Con un analizador químico de orina que automáticamente avisa al técnico de la necesidad de pasar un control de calidad y que tiene la opción de bloquear el equipo hasta que se han superado con éxito los controles de calidad establecidos. Eso es la calidad sin compromisos.


• Dimensiones	Ancho: 373 mm Profundidad: 324 mm Alto: 282 mm
• Peso:	7.4 kg

¿Cómo puede hacer que su tecnología trabaje más, para que usted no tenga que hacerlo?

Con un analizador químico de orina que hace más eficiente su volumen de trabajo mediante la calibración automática, el arranque inmediato, una amplia gama de opciones de análisis, informes flexibles y una interfase fácil de usar que le ofrece un control total.



El analizador Clintek Advantus ofrece una amplia gama de exámenes de orina que ayudan a los profesionales de la salud a dar un trato de calidad a sus pacientes y les ayuda a diagnosticar gran cantidad de enfermedades y condiciones médicas como la diabetes, las enfermedades renales, las infecciones del tracto urinario, y el funcionamiento del hígado.

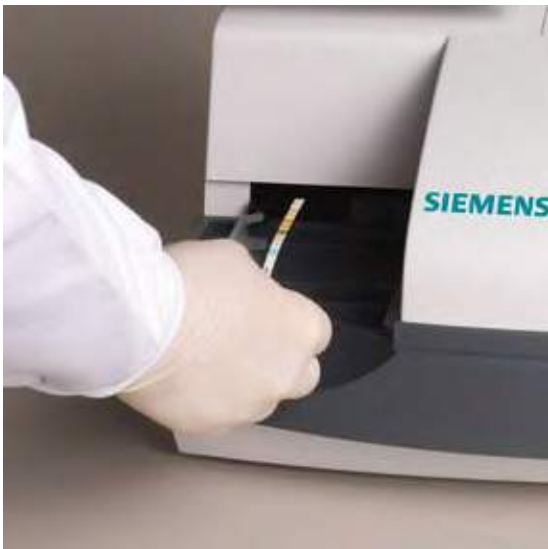

Opción muestra urgente



Pantalla táctil a color

Una calidad fiable con alto rendimiento para mejorar la productividad

El analizador Clintek Advantus está pensado para la lectura automática de las tiras de orina de la familia Multistix® en laboratorios con un número de muestras entre medio y alto. Con un rendimiento de hasta 500 pruebas por hora, el analizador Clintek Advantus le proporciona toda la fiable tecnología de su prestigioso predecesor, el analizador estándar en la industria Clintek® 500.

Consolidación de los datos de microscopía

- Marca e imprime automáticamente informes para las muestras que requieren microscopía complementaria.
- El técnico introduce los resultados de microscopía usando la pantalla táctil o el teclado externo.
- El informe consolidado que se puede imprimir y/o transmitir al LIS.

Control de calidad mejorado

- Indica automáticamente a los técnicos la necesidad de realizar un análisis de control de calidad.
- La capacidad de bloqueo del equipo garantiza el cumplimiento de las normas de calidad.
- Programación de las pruebas de calidad en función de las normas de calidad de su laboratorio.
- Calibración automática.
- Software en español.

Funcionamiento flexible

- Memoria para 500 resultados y 200 controles.

- Se adapta fácilmente a las peticiones de los médicos y a los análisis urgentes.
- Preparado para conectarse a la red. (Puerto para interfase)
- Hasta tres tipos de informes confirmatorios de señalización diferentes definidos por el usuario.
- Depósito para desecho de tiras reactivas.
- Monitor e impresora integrados.
- Se puede adaptar un teclado de PC y un lector de código de barras, para mayor comodidad del usuario.
- Tecnología: Fotometría de reflexión.
- Velocidad: 1 tira cada 7 segundos, lo que equivale a 500 tiras por hora.
- Especificaciones de voltaje: 110 V/ 70 hz
- La marca de analizadores y tiras de orina más utilizada en todo el mundo.
- Basado en la probada tecnología del analizador Clintek 500.
- Resultados totalmente fiables con la mejor calidad en los que los clínicos pueden confiar.
- Se puede adaptar un teclado de PC y un lector de código de barras, para mayor comodidad del usuario (opcional).
- Software en español.



Cambio de configuraciones con solo pulsar un icono.



Se incluyen los resultados microscópicos en los informes impresos y LIS

El analizador Clintek Advantus realiza pruebas de:

- Leucocitos
- Nitritos
- Proteínas
- Sangre
- Glucosa
- Cetona (Ácido acetoacético)
- Bilirrubina
- Urobilinógeno
- pH
- Densidad